

eagle.scan

Abre las puertas a la nueva generación de **servicio digital**

LIGEREZA INIGUALABLE Y FLUIDEZ INTELIGENTE EN ESCANEO INTRAORAL.

Fabricado 100 % en Brasil, Eagle Scan es el escáner intraoral más ligero del mercado, con tan solo 119 g. Fue diseñado para transformar la experiencia digital en consultorios y clínicas dentales. Combinando ergonomía, rendimiento e inteligencia artificial, proporciona escaneos más rápidos, precisos e intuitivos de principio a fin.

Además, Eagle Scan utiliza el mismo software que otros dispositivos de la línea de imágenes, lo que permite una integración completa en el flujo de trabajo digital de la clínica. Esto garantiza mayor agilidad, organización y consistencia entre exámenes, unificando la atención con eficiencia y tecnología nacional.

LISTO PARA DIVERSAS ESPECIALIDADES



Ortodoncia



Protesis



Restauraciones



Implantes

SOFTWARE ABIERTO IMPULSADO POR IA

Eagle Scan funciona con un software nacional intuitivo y completo. El software y sus actualizaciones están incluidos* y son compatibles con formatos abiertos (CAD/CAM), lo que facilita su integración con laboratorios.


*Con la compra del equipo. No aplicable a opciones de suscripción.



Mapa de calidad



Imagen en HD

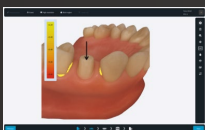


Análisis de retención



Mapa de oclusión



Delimitaciones de los términos de preparación


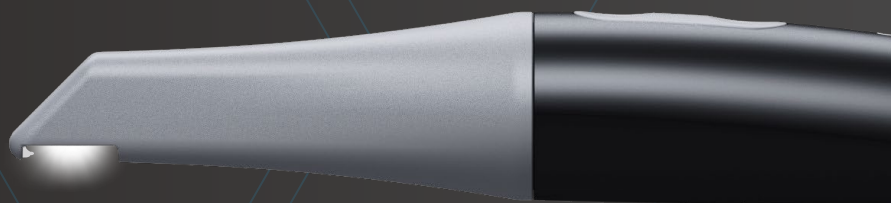


FLOW AI

Con la tecnología Flow AI, Eagle Scan ignora automáticamente estructuras no deseadas, como mejillas y lengua, optimizando el tiempo de escaneo y garantizando mayor fluidez y comodidad durante el procedimiento.

FLUIDEZ CON PRECISIÓN INTELIGENTE

SIN AI

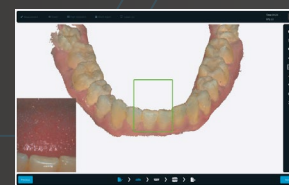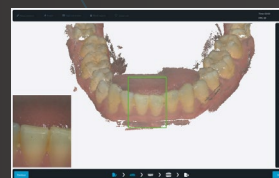

CON AI

UNA NUEVA MIRADA A LA EVOLUCIÓN CLÍNICA

La nueva herramienta de comparación permite analizar exámenes realizados en diferentes momentos, facilitando el seguimiento de la evolución del paciente y añadiendo valor al diagnóstico y la comunicación clínica.



ANTES



DESPUÉS



Especificaciones del escáner

Tipo de Scanner	Escáner portátil de mano que crea impresiones ópticas de arcos dentales.
Dimensiones dd Scanner	C x L x A: 256mm x 43mm x 43mm
Peso	119g
Longitud del cable	3m
Elemento calefactor	Desempeñado sin calor y de bajo consumo
Tecnología de sensores	CMOS
Color	Sim
Frecuencia de escaneo	30 fps
Iluminación	LED – Alta potencia

Proceso de escaneo

Preparación del diente	No es necesario utilizar spray ni polvos, pero siempre es recomendable secar bien la zona.
Principio de escaneo	Escaneo continuo y acumulativo, con datos de profundidad y color
Distancia entre el escáner y el diente	0 – 20mm
Interfaz computadora-escáner	Cable USB 3.0

Software

Licencia de software Eagle Eye	Licencia y actualizaciones incluidas con la compra del equipo. No aplicable a opciones de suscripción.
Formato de arcos generados	STL, PLY, OBJ
Compatibilidad con Sistemas CAD/CAM	Archivos abiertos, compatibles con todos los sistemas CAD/CAM abiertos del mercado
Interface Computador - Scanner	Cable USB 3.0

Configuración de la computadora

Procesador	Intel i7 ou i9 12ª / 13ª / 14ª, Mínimo de 24 MB Intel® Smart Cache
Memoria RAM	Mínimo: 16GB (DDR4 ou superior), Recomendado: 32GB (DDR4 ou superior)
GPU	Notebook o desktop: NVIDIA RTX4060 o superior
SSD	512GB o superior
Puerto USB	Al menos un puerto USB 3.0

www.dabiatlante.com.br/es

dabiatlante_latam

Dabi Atlante Latam

